


MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION PCP CATALOGUE N°. IDT0380



A) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Ident.

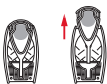

B) Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance à tester en essayant d'en recueillir le plus possible.



C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.



Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



D) Avec le pouce et l'index, presser fortement la **chambre 1**, jusqu'à ce que l'ampoule se casse.



E) Agiter doucement l'unité de test 2-3 secondes. Ici, aucune couleur n'apparaît.



G) Briser l'ampoule de la **chambre 2**



H) Agiter 2-3 secondes.



I) L'apparition d'une couleur turquoise sur particules présentes à l'extrémité de la languette indique la présence de PCP.

Note : Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.